


# ZALECENIA I UWAGI DO ZAMÓWIEŃ

- W przypadku stóp o parabolicznej muszli pomiar wysokości musi uwzględniać najniższy punkt. Cover w takim przypadku należy zeszlifować samodzielnie do kształtu stopy.




- Przed wysłaniem zamówienia prosimy o sprawdzenie czy stopa zmieści się do covera - wymiary wewnętrzne coverów w wersji Flex Neo Smart i Flex Neo AK są stałe i podane w katalogu. W przeciwnym przypadku należy wybrać tylko covery tylko w wersji MAX.
- Jeżeli cover Neo ( z magnesami ) ma posiadać jakieś specjalne otwory, np. na regulację, na przycisk PIN to należy wybrać covery tylko w wersji MAX.
- Pomiędzy coverem Neo ( z magnesami ) a stopą pozostaje szczelina około 7 mm. Dla bardzo miękkich stóp, np. z włókna węglowego, odległość ta powinna być znacznie większa niż 7 mm. Cover nie powinien dotykać stopy podczas chodzenia.
- W przypadku amputacji podudzia ważne jest aby bardzo dokładnie zmierzyć obwód lejka - wskazówki są podane w formularzu do zamówień.
- Wszystkie nasze covery Neo ( z magnesami ) można skraćć używając do tego noża i szlifierki.
- Przed skanowaniem gładkich lub lśniących powierzchni, np. nierdzewnych, warto owinąć protezę cienkim materiałem. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak spryskanie powierzchni specjalnym proszkiem w spray'u, na przykład firmy IP Division GmbH. ([www.ipdent.com](http://www.ipdent.com))

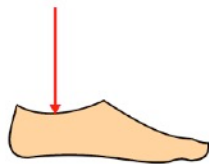

# BEZBOLESNE TATUAŻE

## ZASADY & ZAMAWIANIE

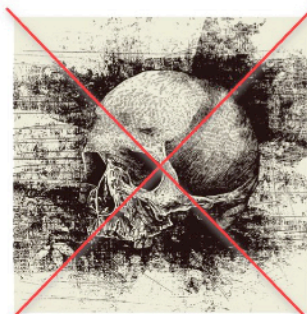

Opcją dodatkowo płatną jest umieszczenie tatuażu. Tatuaż można wybrać gotowy z naszej strony internetowej albo zaprojektować swój własny.

W przypadku własnego tatuażu należy przysłać nam plik graficzny. Są jednak pewne reguły :

- Zdjęcie czy rysunek musi być na białym tle.
- Układ pionowy - to znaczy że wysokość rysunku powinna być minimum dwa razy większa niż jego szerokość.
- Odpowiednia rozdzielczość musi gwarantować aby nie powstało ziarno - z reguły pliki powyżej 300 kB są odpowiednie.

